

1



Intimbereich reinigen

Schamlippen spreizen
Mit frischem feuchtem Tuch
von vorne nach hinten reinigen
Anschließend trocknen

2



Ersten Urin verwerfen

Lassen Sie den ersten Teil
des Urins in die Toilette laufen.
Nicht auffangen!

3



Mittelstrahl auffangen

Fangen Sie anschließend
etwa 10–20 ml Urin
im Urinbecher auf.


4



Restlichen Urin verwerfen

Nach dem Auffangen lassen Sie
den restlichen Urin wieder
in die Toilette laufen.


5

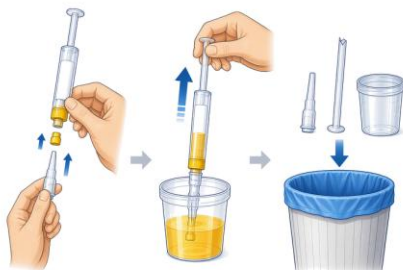

Probe mit der Monovette aufnehmen aufnehmen

Stopfen abnehmen und Entnahmespitze
aufsetzen.
Spitze eintauchen und Kolben nach oben ziehen
und dann abbrechen.
Stopfen aufsetzen; Spitze, Kolbenstange und
Becher verwerfen.

6

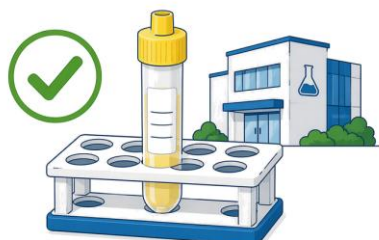

Fertig

Die Probe ist für den Transport bereit.
Bitte geben Sie die Urin-Monovette
zeitnah in Ihrer Praxis oder
im Labor ab.

Für bestimmte Untersuchungen – zum Beispiel den Nachweis von Chlamydien oder Gonokokken – wird der Erststrahlurin benötigt: also die erste Urinportion. Sie enthält Zellen aus der Harnröhre, die für diese Tests wichtig sind. Für die meisten anderen Untersuchungen wird dagegen Mittelstrahlurin verwendet.

1



Intimbereich reinigen

Schamlippen spreizen
Mit frischem feuchtem Tuch
von vorne nach hinten reinigen
Anschließend trocknen

2



Erststrahl auffangen

Fangen Sie die ersten
etwa 10–20 ml Urin
im Urinbecher auf.

3



Restlichen Urin verwerfen

Nach dem Auffangen lassen Sie
den restlichen Urin wieder
in die Toilette laufen.


4



Probe mit der Monovette aufnehmen

Stopfen abnehmen und Entnahmespitze
aufsetzen.
Spitze eintauchen und Kolben nach oben ziehen
und dann abbrechen.
Stopfen aufsetzen; Spitze, Kolbenstange und
Becher verwerfen.


5

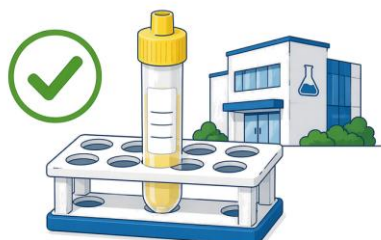

Fertig

Die Probe ist für den Transport bereit.
Bitte geben Sie die Urin-Monovette
zeitnah in Ihrer Praxis oder
im Labor ab.

1

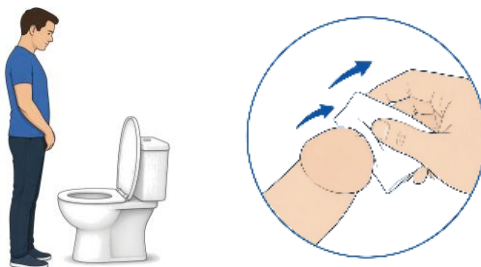

Penis reinigen

Vorhaut zurückziehen
Eichel mit frischem feuchtem
Tuch reinigen
Anschließend trocknen

2



Ersten Urin verwerfen

Lassen Sie den ersten Teil
des Urins in die Toilette laufen.
Nicht auffangen!

3



Mittelstrahl auffangen

Fangen Sie anschließend
etwa 10–20 ml Urin
im Urinbecher auf.


4



Restlichen Urin verwerfen

Nach dem Auffangen lassen Sie
den restlichen Urin wieder
in die Toilette laufen.


5

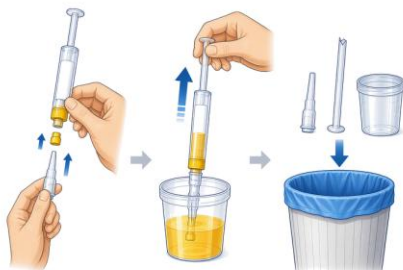

Probe mit der Monovette aufnehmen aufnehmen

Stopfen abnehmen und Entnahmespitze
aufsetzen.
Spitze eintauchen und Kolben nach oben ziehen
und dann abbrechen.
Stopfen aufsetzen; Spitze, Kolbenstange und
Becher verwerfen.

6

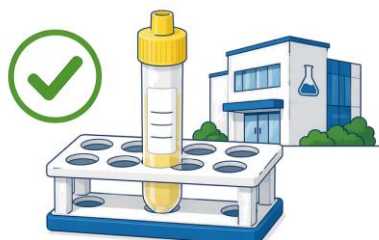


Fertig

Die Probe ist für den Transport bereit.
Bitte geben Sie die Urin-Monovette
zeitnah in Ihrer Praxis oder
im Labor ab.

Für bestimmte Untersuchungen – zum Beispiel den Nachweis von Chlamydien oder Gonokokken – wird der Erststrahlurin benötigt: also die erste Urinportion. Sie enthält Zellen aus der Harnröhre, die für diese Tests wichtig sind. Für die meisten anderen Untersuchungen wird dagegen Mittelstrahlurin verwendet.

1

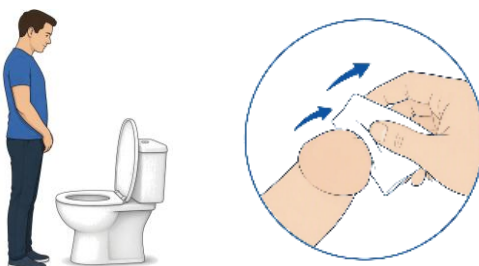

Penis reinigen

Vorhaut zurückziehen
Eichel mit frischem feuchtem
Tuch reinigen
Anschließend trocknen

2



Erststrahl auffangen

Fangen Sie die ersten
etwa 10–20 ml Urin
im Urinbecher auf.


3



Restlichen Urin verwerfen

Nach dem Auffangen lassen Sie
den restlichen Urin wieder
in die Toilette laufen.


4

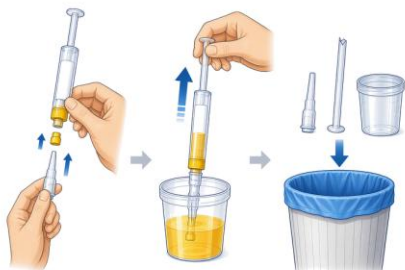

Probe mit der Monovette aufnehmen

Stopfen abnehmen und Entnahmespitze
aufsetzen.
Spitze eintauchen und Kolben nach oben ziehen
und dann abbrechen.
Stopfen aufsetzen; Spitze, Kolbenstange und
Becher verwerfen.

5

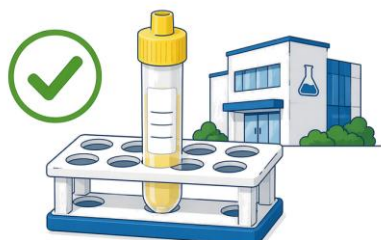

Fertig

Die Probe ist für den Transport bereit.
Bitte geben Sie die Urin-Monovette
zeitnah in Ihrer Praxis oder
im Labor ab.